

Go Direct hlukoměr s mikrofonom

Objednávkový kód: GDX-SND

USB připojení

1. Připojte senzor dodávaným kabelem k USB portu počítače, chromebooku či tabletu.
2. Spustíte aplikaci Vernier Graphical Analysis. (Aplikace je k dispozici zdarma pro počítače, chromebooky, tablety a chytré telefony – více na www.vernier.cz/GA)




Připojení přes Bluetooth

1. Senzor zapnete krátkým stisknutím tlačítka. LED indikátor začne červeně blikat.
2. Spustíte aplikaci Vernier Graphical Analysis. (Aplikace je k dispozici zdarma pro počítače, chromebooky, tablety a chytré telefony – více na www.vernier.cz/GA)
3. Vyberte **Měření pomocí senzorů**.



4. V seznamu nalezených senzorů klikněte na **Připojit** u požadovaného senzoru.

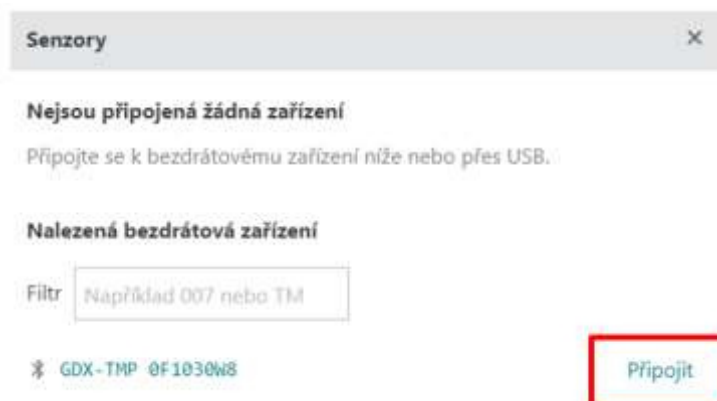

(U zařízení s Androidem je potřeba povolit polohové služby pro vyhledání připojitelných senzorů, tj. pokud zařízení nevidí žádné senzory, povolte polohové služby.)

5. Klikněte na tlačítko **Hotovo** a můžete měřit.

Vestavěný akumulátor

Senzor je vybaven lithium-polymerovým akumulátorem. Záruka na akumulátor je jeden rok, při běžném používání však lze očekávat několikaleté fungování. Akumulátor je možné vyměnit.

Nevystavujte akumulátor teplotám nad 35 °C, vysoké teploty zkracují životnost akumulátoru.

Před dlouhodobějším uskladněním senzoru (např. před prázdninami) senzor vypněte podržením zapínacího tlačítka na dobu alespoň 3 sekundy. Ve vypnutém stavu na senzoru neblíkají žádné diody. Akumulátor ve vypnutém senzoru se může zcela vybit, nedojde však k jeho poškození.

Nabíjení senzoru

Senzor se nabíjí, kdykoli je připojen kabelem k aktivnímu USB portu počítače či nabíječky.

K nabíjení senzoru lze využít i hromadnou nabíječku Vernier GDX-CRG (www.vernier.cz/GDX-CRG).

Po dobu nabíjení blíká LED u ikony baterie oranžově. Při úplném nabití pak svítí tato LED zeleně.

Technická specifikace

- frekvenční rozsah mikrofonu 100 Hz – 15 kHz
- typická maximální frekvence 10 kHz
- zabudované váhové filtry A a C
- rozsah měřené úrovně hluku 55–110 dB
- přesnost ± 3 dB
- citlivost 0,1 dB
- USB verze 2.0 full speed
- Bluetooth verze 4.2
- maximální bezdrátový dosah 30 m (bez překážek)
- kapacita akumulátoru 300 mAh
- výdrž akumulátoru zhruba 10 hodin kontinuálního sběru dat

Záruka

Výrobce poskytuje záruku 5 let (na akumulátor 1 rok). Životnost akumulátorů může být ovlivněna způsobem a intenzitou používání. Záruka se nevztahuje na škody vzniklé užitím věci v rozporu s účelem a škody vzniklé nepřiměřeně hrubým zacházením.

Kontakt

- email: info@edufor.cz
- tel. (+420) 774 693 244